

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W19-481344

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☒ A

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1624 Société :

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AKRAM ABDELNASIR

Date de naissance : 01/01/1949

Adresse : LOT LA NOUVE NR 469 CASABLANCA

Tél. : 522932094 Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : **Dr. BAKRIM Mohamed**
OPHTALMOLOGUE
Maladies et Chirurgie des Yeux
Place Chahdia, 233 Rd. Oued Daoua
CASABLANCA

Date de consultation : 28 OCT. 2019

Nom et prénom du malade : AKRAM ASMA Age: 61

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : 22 cécité réfractive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'att. médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) : [Signature] Le : 29/10/2019

MUPRAS
07 NOV. 2019
ACCUEILLI

Dr Mohamed BAKRIM

* Spécialiste en Chirurgie et Maladies des Yeux

* Traitement par laser

* Chirurgie par phaco-émulsification, Strabisme

* Membre titulaire de la société Française d'ophtalmologie

* Membre de l'American Academy of ophtalmology



الدكتور محمد باكريم

اختصاصي في أمراض و جراحة العيون

جراحة قصر البصر : العلاج بالليزر

الجلالة بدون تخدير، حول البصر

عضو فعلي في الجمعية الفرنسية لأطباء العيون

عضو في الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون

Casablanca, le

28 OCT. 2019

الدار البيضاء في

AKRAY ASMA

٢


VL OD = +1,25 m

OG = (60' - 1,00) + 1,75 m

VTAD, organiques, progressifs

VP add ODG + 3,00 m

Al BETADINE coll + 26 / 1 ODG. 98,00

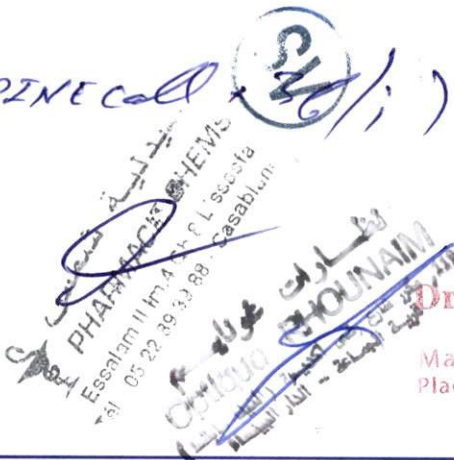

Dr. BAKRIM Mohamed
OPHTALMOLOGUE

Maladies et Chirurgie des Yeux
Place Chahdia, 323 Bd. Oued Daoura

Oulfa - CASABLANCA

Tel. 05 22 39 33 88

ساحة الشهدية، 323 شارع واد الدورة الألفة - الدار البيضاء - العيادة: 05 22 91 42 65
Place Chahdia, 323 Bd Oued daoura- Oulfa- Casablanca - Cabinet : 05 22 91 42 65

OPTIQUE RHOUNAÏM

119 Bis Av. Reda Gudira
Djamâa - Casablanca
Tél. : 05 22 59 63 27



نظارات غونايم

119 مكرر شارع رضى اكديرة
(النيل سابقا) قرية الجماعة - البيضاء
الهاتف: 05 22 59 63 27

Client : ALKAM ASMA N° 009064

Date : 04-11-2019

Docteur : Med. 15

Nomenclature N : 122 123

VL. OD : cyl sph +1.21

OG : cyl sph (60° -1) +1.71

VP. OD : cyl sph ND +3

OG : cyl sph ND +3

Verres : 1.56 DLM, 1.56, 2200, 1.56

Monture : Plastic : 1.000 L

TOTAL : 3200 L

نظارات غونايم
Optique RHOUNAÏM
119 مكرر شارع رضى اكديرة
قرية الجماعة - الدار البيضاء



Instructions for Use – please read attentively

BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy

Read this information carefully before you start using BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy. DO NOT THROW THIS LEAFLET AWAY! It contains important information. If you have any questions about BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy please ask your doctor or pharmacist.

1. What is BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy and what is it used for:
BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy is a product which contains Ectoin®, a cell-protective molecule with inflammation-reducing and membrane-stabilising properties.
BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy is an isotonic solution and can be used to treat and prevent symptoms of allergic conjunctivitis. Itchy, red, or watery eyes can effectively be alleviated.
BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy protects against the harmful influence of allergens and supports the regeneration process of irritated and sensitive conjunctiva.
BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy is suitable for wearers of contact lenses, children and for sensitive eyes.
BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy is free of preservatives.

2. Warnings and precautions

- BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy should not be used in the case of hypersensitivity to Ectoin® or any of the other ingredients of the eye drops.
- If recommended by your doctor/health care professional, BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy may be used after eye/ocular surgery and trauma.
- If allergic reactions occur, the use of BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy must be discontinued immediately.
- To ensure safe hygiene, each eye drop bottle should be used by one person.
- Do not use for more than 6 weeks after opening.

3. What you need to know before using BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy

There are no known interactions between BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy and other eye drops or topical eye ointments.
Wait at least 15 minutes after using BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy before applying any other product or drug into the eye.

4. What should be noted during pregnancy and while breast-feeding

Currently, there are no data available regarding the use of BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy during pregnancy and while breast-feeding.
Consult your doctor or pharmacist for advice, before using this product, if you are:
• pregnant or breast-feeding
• not sure whether you are pregnant or not

5. How to use BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy

Always use BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy according to these instructions for use. Consult your doctor or pharmacist before use if you are not sure.
If not otherwise prescribed by your doctor, please apply 1-2 drops per eye, several times a day. Children 10 years of age and younger should be assisted during the application of BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy.
1. Remove the protective cap of the bottle. Avoid any touching of the exposed tip.
2. Place your index and middle finger on the circular pressure plate on the top of the bottle and the thumb on the bottom of the bottle.
3. Before using BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy for the first time, please turn the tip downwards and press the bottom of the bottle with your thumb about 2-3 times, until the first drops comes out. Do not cut the tip.
4. Bend your head backwards and with the forefinger gently pull your lower eyelid downwards and look up. Hold the bottle as vertical as possible. Avoid direct contact of the bottle tip with your fingers, eyes, or contact lenses.

5. To apply BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy bottle once firmly. Due to the patented fit released.

6. Close your eye slowly to disperse the solution.
7. Repeat the procedure on the other eye.

8. After each use dry the tip and close the bottle.
9. Possible side effects of BETADINE® SOOTHING RELIEF Eye Allergy

10. Date of Revision: April 2016, Rev. 01



Legal Manufacturer:

biotrop AG, Stockumer Str. 28, 58453 Witten,

Manufacturing Site:

Laboratoires Pharmastyle, Z.I. Kraft, 67150 B

10. Date of Revision: April 2016, Rev. 01

®: BETADINE is a Registered Trademark
This product is Povidone-Iodine free

30306 EN-FR-AR NOT123208V02

Explanation of the symbols used on the

CE mark with Notified Body number	Legal Manufacturer
0197	
Lot Number	Use By (Expiry date)
LOT	

